




ORALNI TUŠ

lips  
stick

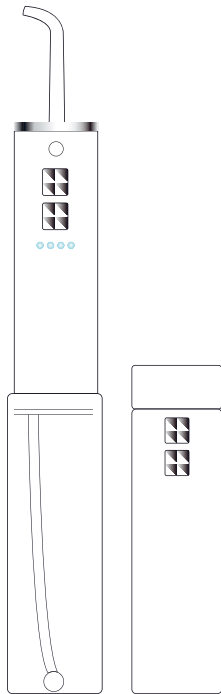

UPUTSTVO  
ZA UPOTREBU

## Dobrodošli u novi način života!

Odabrali ste prenosivi oralni tuš i otvorili nove puteve ka boljoj oralnoj higijeni, zdravim desnama i zubima, i pre svega, osmehu koji osvaja.

## MERE OPREZA!

Prilikom korišćenja električnih uređaja posebno kada su deca prisutna, potrebno je slediti niže navedene mere predostrožnosti.

## PRE UPOTREBE PROČITATI UPUTSTVO

### OPASNOSTI:

#### Da umanjite rizik od strujnog udara:

- ◆ Ne koristite punjač mokrim rukama.
- ◆ Ne potapajte punjač u vodu ili drugu tečnost.
- ◆ Pre svake upotrebe uređaja proveriti da li na punjaču i/ili kablju postoje oštećenja.


### UPOZORENJE:

#### Da umanjite rizik od opekotina, strujnog udara, požara, ozbiljnih povreda ili oštećenja uređaja:

- ◆ Ne priključujte ovaj uređaj na napon koji je različit od naponskog sistema navedenog na uređaju ili punjaču.
- ◆ Ne koristite ovaj uređaj ako su kabl, USB priključak, utikač ili utičnica oštećeni, ako ne radi ispravno, ili ukoliko je ispušten u tečnost. Obratite se ovlašćenom servisu preduzeća PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.
- ◆ Ne usmeravajte vodu ispod jezika, u uho, nos ili druge osetljive regije. Ovaj uređaj može proizvesti pritisak koji može uzrokovati ozbiljna oštećenja u ovim regijama. Pogledajte uputstvo da biste pravilnu koristili oralni tuš.
- ◆ Upotrebljavajte ovaj uređaj samo kako je navedeno u ovom uputstvu i prema savetima Vašeg stomatologa.
- ◆ Napunite rezervoar samo vodom ili drugim rastvorima preporučenim od strane stomatologa.
- ◆ Ne ispuštajte i ne ubacujte nikakav strani predmet u bilo koje otvore na proizvodu.
- ◆ Držite punjač i kabl dalje od zagrejanih površina.
- ◆ Ne koristiti uređaj tamo gde se koristi kiseonik i aerosolni sprejevi.
- ◆ Ne koristite sredstva za ispiranje koja sadrže jod, izbeljivač ili ulje čajevca.
- ◆ Ne koristite uređaj dok nosite bilo kakav oralni nakit. Uklonite oralni nakit pre upotrebe oralnog tuša.
- ◆ Ne koristite uređaj ukoliko imate otvorenu ranu na jeziku ili u ustima.
- ◆ Ako Vam je lekar preporučio primenu antibiotske terapije pre stomatoloških procedura, trebalo bi da se posavetujete sa stomatologom pre upotrebe ovog uređaja ili bilo kog drugog sredstva za oralnu higijenu.
- ◆ Ukoliko uređaj koriste deca ili osobe sa invaliditetom, potrebno ih je nadzirati.
- ◆ Decu držati pod nadzorom kako se ne bi igrala ovim uređajem.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO**

## Opis proizvoda

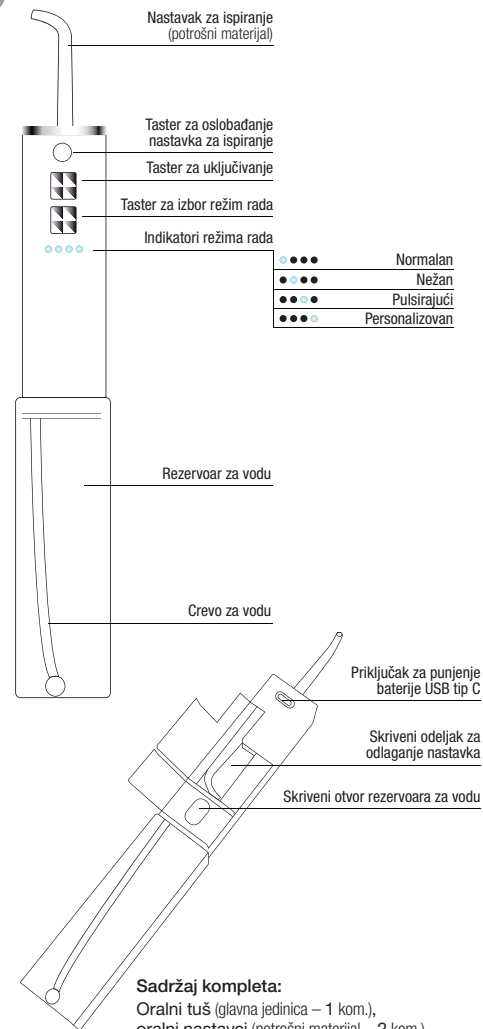


#### Sadržaj kompleta:

Oralni tuš (glavna jedinica – 1 kom.),  
oralni nastavci (potrošni materijal – 2 kom.),  
kabl za punjenje baterije (deo pri glavnoj jedinici – 1 kom.),  
torbica za odlaganje (pribor – 1 kom.),  
uputstvo za upotrebu

## Upotreba

### Smernice za upotrebu


- ◆ Pre prve upotrebe punite bateriju uređaja sat vremena.
- ◆ Za punjenje baterije koristite izvor napajanja koji ima izlaz od 5 V = 1 A (odgovarajući punjač ili USB priključak).
- ◆ Ne koristite brzi punjač.
- ◆ Ne koristite uređaj tokom punjenja baterije.

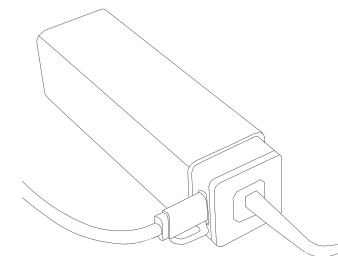

1. Povucite rezervoar za vodu na dole.




2. Otvorite poklopac odeljka za odlaganje nastavka, izvadite isti.

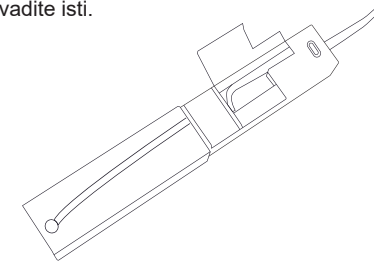


3. Postavite nastavak u sredinu priključka na vrhu oralnog tuša i pritisnite čvrsto. Potvrda da je nastavak pravilno postavljen je zvuk „klik“.



Pritisnite taster za oslobađanje nastavka kako biste isti uklonili.

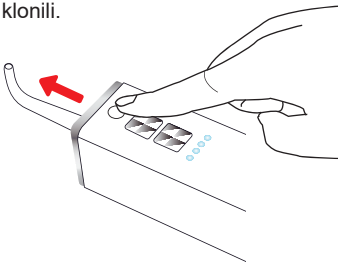

4. Otvorite poklopac rezervoara za vodu, napunite rezervoar mlakom vodom.

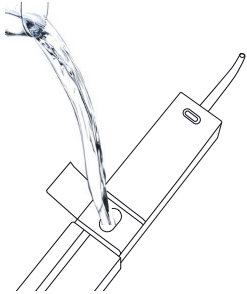

## Podešavanje pritiska


Pritisnite taster za izbor režima rada kako biste podesili pritisak. Počnite sa najnižim pritiskom i postepeno pojačavajte prema svojim potrebama. Kako biste izbegli prskanje podesite željeni režim rada pre uključivanja.

Na raspolaganju su Vam četiri režima rada.

- ◆ **Normalan**  
Za svakodnevno održavanje oralne higijene.
- ◆ **Nežan**  
Nežno čišćenje zuba i desni, posebno pogodan za osetljive desni
- ◆ **Pulsirajući**  
Režim čišćenja zuba i desni promenljivim pritiskom mlaza.
- ◆ **Personalizovan režim rada.**

U personalizovanom režimu rada korisnik podešava jačinu pritiska prema sopstvenim potrebama. Izaberite prvo personalizovan režim rada zatim pritisnite i neprekidno držite pritisnutim taster za izbor režima rada, tada će se pritisak vode postepeno povećavati od najslabijeg do najjačeg, dok će indikator za personalizovan režim rada blinkati. Otpustite taster za odabir režima rada, kada postignete željeni pritisak.

## 5. Započnite čišćenje

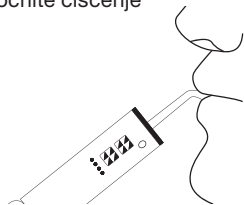

- ◆ Ovaj uređaj u memoriji čuva režim rada koji je poslednji korišćen. Po uključivanju, uređaj će automatski započeti rad u tom režimu.
- ◆ Pritisnite taster za izbor režim rada kako biste izabrali jedan od četiri koja su Vam na raspolaganju
- ◆ Promena režima rada se može izvršiti kada je uređaj isključen. Dakle, možete odabrati željeni režim rada, a zatim započeti čišćenje.
- ◆ Ovaj uređaj je podešen da se automatski isključi nakon 120 sekundi korišćenja istog režima rada.
- ◆ Da biste proverili preostalu snagu baterije, držite taster za uključivanje 3 sekunde.
- ◆ Uzastopno blinkanje četiri lampice ukazuje na punjenje baterije. Sve lampice istovremeno svetle kada je baterija potpuno napunjena.
- ◆ Ukoliko tokom korišćenje lampica personalizovanog režima rada počne da svetli crveno to znači da je baterija skoro sasvim prazna i da istu treba ponovo napuniti.
- ◆ Tokom punjenja uređaj se ne može koristiti.

## Preporučena tehnika

Nagnite se nad lavabo i postavite vrh nastavka u usta. Usmerite vrh nastavka prema zubima i uključite uređaj. Za najbolje rezultate počnite sa čišćenjem od oblasti zadnjih zuba i pomerajte mlaz ka prednjim zubima. Polako pomerajte vrh nastavka duž linije između desni i zuba.

Nastavite dok sve oblasti oko i između zuba ne budu očišćene Usmerite mlaz pod pravim uglom u odnosu na desni. Zatvorite usne ali ne sasvim da biste omogućili vodi da slobodno otiče iz Vaših usta u lavabo. Za najbolje rezultate, tokom ispiranja držite uređaj uspravno.



## Nakon završetka upotrebe

Isključite uređaj, a rezervoar za vodu ispraznite i osušite pre odlaganja.

## Saveti za otklanjanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Dolazi do curenja na spoju nastavka i uređaja	Zaptivna gumica priključka je možda oštećena ili je nastavak nepravilno postavljen	Proverite da li je nastavak pravilno postavljen ili se obratite servisu.
Curenje rezervoara	Oštećena zaptivna gumica ili nepravilno postavljen rezervoar	Zamenite zaptivnu gumicu ili je pravilno postavite ili se obratite servisu.
Nedovoljan pritisak mlaza	Ispražnjena baterija	Napunite bateriju
Uređaj se ne uključuje	Ispražnjena baterija	Napunite bateriju

Ukoliko ne uspete da rešite probleme prateći uputstva iz gornje tabele obratite se prodavcu ili preduzeću PRIZMA KRAGUJEVAC DOO

**PRIZMA KRAGUJEVAC DOO**

Kragujevac, Kumanovska 8

BESPLATAN POZIV **0800 200 000**

E-mail: [info@prizma.rs](mailto:info@prizma.rs)



## IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi dve godine od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u izradi, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

**Izjava se ne odnosi na:**

**Potrošni materijal:** nastavak za ispiranje (označeno u odeljku „Opis proizvoda“ ovog uputstva za upotrebu)

**Pribor isporučen uz proizvod:** torbica za odlaganje

**Proizvod koji je neispravan usled:**

- Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterije
- Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
- Vršnja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
- Upotrebe potrošnog materijala pribora i delova koje nije isporučio proizvođač (rezervoar za tečnost, nastavci za ispiranje i sl.)
- Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari грома i dr.



[www.prizma.rs](http://www.prizma.rs) • online prodavnica